

Sterilizzatrice Kronos Classe B



ROSI
Reverse Osmosis Steam Injection
TECHNOLOGY

Newmed

Collega. Fai scorrere. Risparmia.

Sistemi professionali di sterilizzazione



✓ Affidabile

Le sterilizzatrici Kronos Classe B sono rinomate per la loro eccezionale affidabilità. Kronos, insieme ai tecnici altamente formati che forniscono l'assistenza tecnica, alla formazione continua per il personale dell'ambulatorio e ai servizi di validazione, vi farà toccare con mano la massima affidabilità sul lavoro.

✓ Veloce

Ora con la tecnologia **QUIKSTEAM™** brevettata di serie, il completamento dei cicli di classe B sarà fino al 20% più veloce rispetto a prima.



✓ Innovativa

Kronos Classe B è il risultato dei continui feedback che i clienti danno al nostro team R&D. Basandosi sulla loro grande esperienza, tutti i membri del team lavorano con l'obiettivo costante di fornire ai nostri clienti componenti di altissima qualità e la migliore tecnologia per le moderne esigenze di trattamento degli strumenti.

*Tempi di ciclo totali soggetti alle condizioni di funzionamento.

Tracciabilità

Ogni singola sterilizzatrice Kronos Classe B dispone di serie di una stampante integrata per la copia cartacea dei parametri di ciascuno ciclo. Il collegamento USB consente di scaricare i dati dei cicli su una chiavetta.



Durata

Tutte le sterilizzatrici Kronos sono ora dotate di un conduttimetro di acqua che funge da protezione supplementare. La qualità dell'acqua è pertanto costantemente monitorata e comunicata all'utente, con un conseguente aumento di sicurezza.




Produttività

Ottimizzate al massimo la produttività, programmando il ciclo di test con un anticipo di ben 24 ore. La vostra unità si riscalderà e sarà pronta per essere usata già al mattino presto. In questo modo aumenterete la produttività e consumerete energia nelle fasce orarie di minor carico.



Manutenzione facile

Un nuovo e raffinato involucro in tre pezzi incrementa la funzionalità dell'unità, facilitando i lavori di manutenzione ordinaria e la validazione annuale.

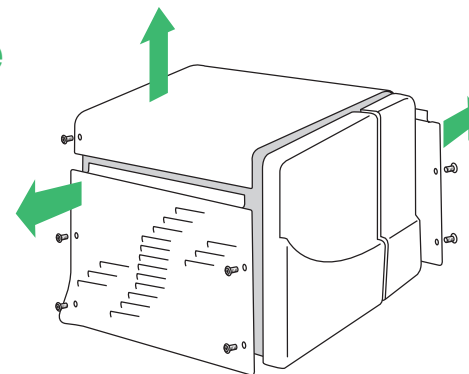


Flessibilità

Un vapore di buona qualità può essere prodotto solo se si utilizza un'acqua di buona qualità. Ecco perché le sterilizzatrici Kronos Classe B offrono una gamma flessibile di soluzioni che vi aiutano ad alimentare l'apparecchio con acqua della qualità desiderata.


Opzione 1
Alimentazione
manuale.
Scarico manuale.



Opzione 2
Alimentazione
manuale.
Scarico automatico.

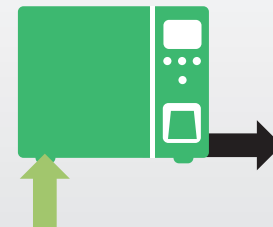

Opzione 3
Alimentazione
automatica.
Scarico manuale.

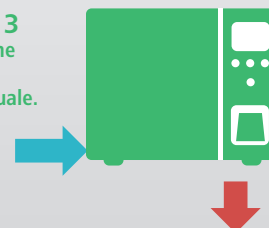


Opzione 4
Alimentazione
automatica.
Scarico automatico.



ROSI
Reverse Osmosis Steam Injection
TECHNOLOGY

ROSI è un sistema di depurazione dell'acqua con tre cartucce integrate, direttamente collegato alla rete idrica dello studio.

Collega. Fai scorrere. Risparmia.

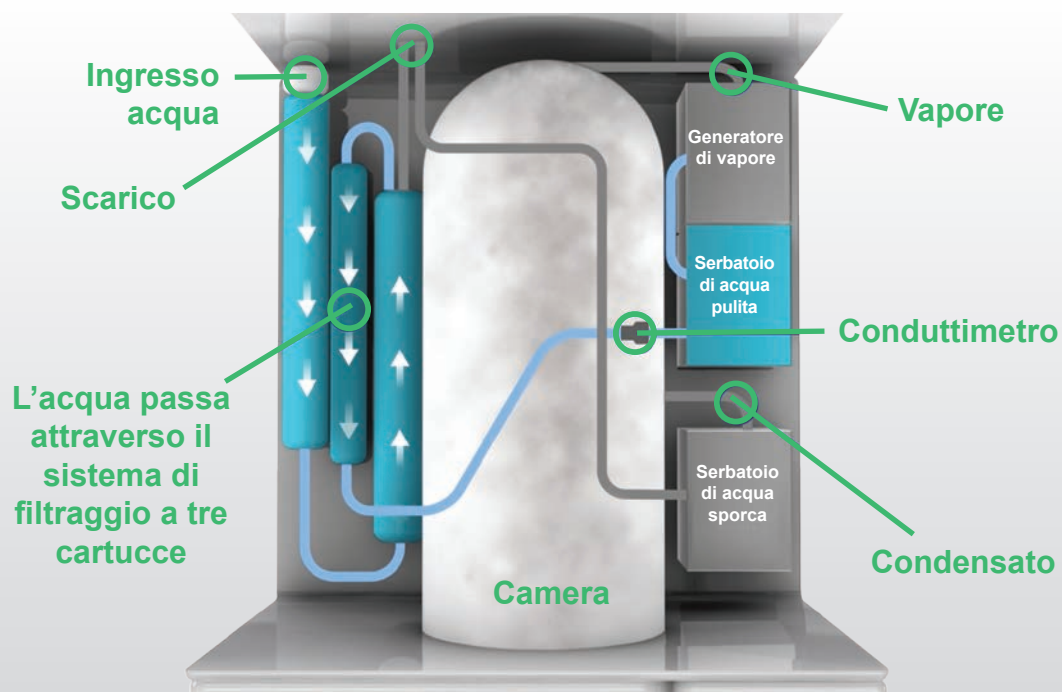

- ✓ Nessun riempimento manuale
- ✓ Risparmio economico
- ✓ Risparmio di tempo
- ✓ Acqua depurata su richiesta

Meno tempo. Meno energia. Più denaro.



Solo a scopo dimostrativo.

Qualche informazione su Newmed

- L'azienda è certificata secondo le normative ISO 9001 e ISO 13485 e, per conto di Midmark, produce la famosa linea di sterilizzatrici a vapore Kronos.
- Facciamo parte del gruppo Midmark - leader del mercato delle sterilizzatrici a vapore negli USA.
- Siamo forti di una rete globale di distributori e specialisti tecnici che abbiamo formato direttamente e che con noi condivide una grande passione.
- Grazie alla nostra esperienza, siamo oggi in grado di produrre sterilizzatrici a vapore di alta qualità, affidabili e facili da utilizzare che uniscono la più moderna tecnologia a vantaggio di studi medici, dentistici e veterinari in tutto il mondo.



Tabella dei cicli* **QUIKSTEAM™**

Grazie alla nostra tecnologia QuikSteam™ brevettata, avrete tempi di ciclo per carichi di classe B fino al 20% più veloci.



Tipo di ciclo	121°C	134°C
Cavi imbustati**	✓	✓
Strumenti solidi imbustati	✓	✓
Strumenti delicati imbustati	✓	✗
Prion	✗	✓
Strumenti porosi imbustati	✓	✓
Veloce - non imbustati	✓	✓
Ciclo di test per Bowie & Dick e Helix	✗	✓
Ciclo Vacuum Test	✓ a <40°C	

** Strumenti cavi tipo A e B, in conformità alla norma EN 13060

La sterilizzatrice Kronos Classe B è conforme a:

93/42/CE	Direttiva sui Dispositivi Medici (DDM)
2014/68/UE	Direttiva sugli Apparecchi a Pressione (PED)
ISO 13485	Sistema di gestione della qualità per dispositivi medici
2012/19/UE	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
EN 13060	Piccole sterilizzatrici a vapore
IEC 61010-1	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici, di misura, controllo e apparecchiature da laboratorio
IEC 61010-2-40	Prescrizioni di sicurezza per sterilizzatrici e disinfettatrici usate nel trattamento di materiale medico
EN 61326-1	Apparecchi elettrici di misura, controllo e per uso in laboratorio: prescrizioni di compatibilità elettromagnetica

* Tempi di ciclo totali soggetti alle condizioni di funzionamento. Su richiesta è disponibile un elenco completo dei tempi di cicli tipici.


Dimensioni	B18	B23
Profondità (mm)	610	695
Larghezza (mm)	505	505
Altezza (mm)	400	400
Profondità della camera (mm)	381	530
Peso (vuoto) kg	56	60

Standard  0051

Sappiamo bene che i vostri standard sono elevati, almeno quanto i nostri.

Tutte le nostre sterilizzatrici sono prodotte secondo la norma EN 13060 e recano il marchio CE conformemente alla Direttiva sui dispositivi medici e alla Direttiva Apparecchi a Pressione.



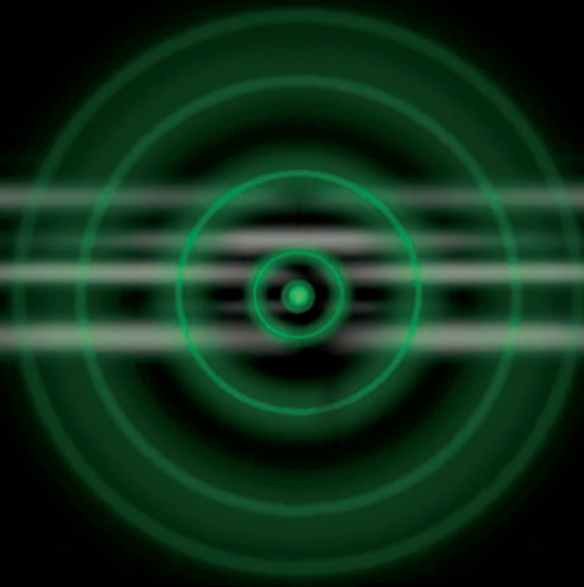

www.newmedsrl.com

Newmed srl - a Midmark Company, Via Lenin 79/A,
42020 Quattro Castella, Reggio Emilia, Italia.

Tel: +39 0522 875 166 Fax: +39 0522 243 096

newmed.sales@midmark.com

Newmed



UKM-068-007 A1 0817